



Inserto universale







Indicatore visivo di usura

La punta dell'inserto è ricoperta da una leggera e sottile pellicola di **nitruro di titanio** (TIN) di 2 µm. D'una durata quattro volte superiore all'acciaio, essa prolunga la durata di vita degli strumenti

Quando questa pellicola di titanio scompare, l'inserto deve essere cambiato per mantenere la sua efficienza ed il confort del paziente.

Finissimo

Più potente

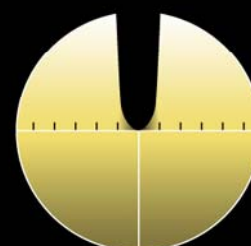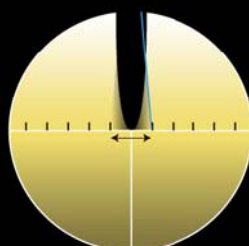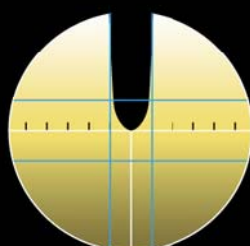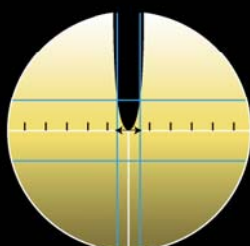

Inserto Scorpion

Altro inserto

Inserto Scorpion

Altro inserto

La finezza della punta degli inserti Scorpion permette un accesso senza difficoltà negli spazi interdentali

Una forte cavitazione viene garantita anche con un detartratore di bassa potenza

Qualità

Distributore per l'Europa

Certificato ISO 9001 & ISO 13485

GÉNÉRIQUE INTERNATIONAL



77, rue Piere Brossolette  
93160 Noisy-le-grand - FRANCE

Fabbricato in Francia

Tel : +33(0) 143 030 684

Fax : +33(0) 143 031 598

Email : generinter@aol.com

www.scorpion.fr

www.generiqueinternational.com

## Detartratori

## Inserti

## Caratteristiche

EMS :

universel



B E M

Adattabile su EMS per il detartraggio sopra gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 50 – 190  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 29 KHz

paro



E P E M

Adattabile su EMS per il detartraggio sotto gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 20 – 130  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 29 KHz

SATELEC / NSK piezo :

universel



B S A

Adattabile su Satelec per il detartraggio sopra gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 50 – 230  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 30 KHz

paro



E P S A

Adattabile su Satelec per il detartraggio sotto gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 50 – 130  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 30 KHz

KAVO SONOsoft :  
KAVO PIEZOlux :


universel



B K P

Adattabile su KAVO PIEZOlux e SONOsoft per il detartraggio sopra gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 50 – 170  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 29 KHz

paro

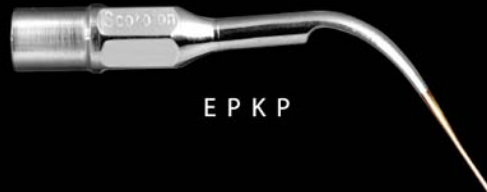

E P K P

Adattabile su KAVO PIEZOlux e SONOsoft per il detartraggio sotto gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 50 – 130  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 29 KHz

SIRONA Sirosonic :

universel



B S I

Adattabile su Sirona Sirosonic per il detartraggio sopra gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 50 – 200  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 29 KH

paro



E P S I

Adattabile su Sirona Sirosonic per il detartraggio sotto gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 50 – 150  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 29 KH

MECTRON :

universel



B M E C

Adattabile su Mectron per il detartraggio sopra gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 50 – 170  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 28 KHz

KAVO SONICflex :



A I R

Adattabile su KAVO SONICflex per il detartraggio sotto gengivale .  
Ampiezza di vibrazione: 100 – 500  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 6000 Hz

W&H - NSK Air :



A I R w

Adattabile W&H e NSK  
Ampiezza di vibrazione: 100 – 500  $\mu\text{m}$  secondo la potenza .  
Frequenza : 6000 Hz

